

Стопа Кинтерра. ROM



Вес пациента до 125кг
Уровень активности K3

- Стопа предназначена пациентам с уровнем активности K3, для протезов как голени, так и бедра, также и при двусторонней ампутации на любом уровне.
- 12° плантарной и дорсальной флексии вместе со смещённой кзади осью шарнира обеспечивают походку, максимально приближенную к естественной физиологической норме, что особенно важно при ходьбе по наклонной поверхности и при переходе с наклонной на ровную поверхность.
- Разделённые носок и пятка улучшают контакт с поверхностью, обеспечивая стабильность при ходьбе по любым неровностям.
- Специальная встроенная пружина помогает предотвратить спотыкание и падение пациента во время фазы переноса при медленной ходьбе.
- Полноразмерная подошвенная часть, отсутствие болтовых соединений в основном карбовом модуле стопы делают перекал ровным и плавным, ещё больше увеличивая комфорт пациента при ходьбе.
- Прочная и надёжная конструкция стопы выдерживает большие нагрузки, а уникальная гидравлическая система обеспечивает плавную работу при больших перепадах температур.
- Удобно расположенные винты регулировок делают процесс настройки быстрым и лёгким.
- Изменяемая высота каблука 0-3,5см

Спецификация:

Основной индекс:

Кинтера (ROM = Range Of Motion)

Диапазон движения щиколотки = 12°:

- плантарная флексия не менее 10

- дорсальная флексия не менее 2

Размерный ряд: 22-31см

Высота каблука: 10мм, изменение высоты каблука: 3,5см

Соединение: пирамидальный адаптер

Гарантия: модуль стопы 2 года,

оболочка 6 месяцев




Габаритные размеры

Размер, см	Высота, мм	Вес, г
25	120	897

Все стопы измерены вместе с оболочкой. Измерения усреднены и могут варьироваться в зависимости от категории жесткости

Артикул стопы

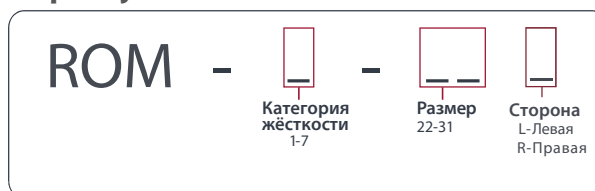

Стопа Кинтерра. ROM

Не рекомендовано:

- пациентам высокой ударной нагрузки при отсутствии дополнительного протеза для занятий спортом
- пациентам с очень быстрой походкой или часто бегающими на постоянном протезе
- тем, кто отдаёт предпочтение более лёгкой по весу стопе, а не стабильности и комфорту передвижения по поверхности

Выбор категории жесткости

Категория	Вес, кг
1	44-59
2	60-68
3	69-77
4	78-88
5	89-100
6	101-116
7	117-125

Дополнительные аксессуары



Сменная оболочка стопы (G3)
(FTC-3M-xxxL-Rx)

Артикул оболочки стопы (при заказе отдельно)

FTC - 3M - L - R

Сторона
L-Левая
R-Правая

САР Размер

0- Есть 22-31см
1-Нет



Соединительная пластина
(САР-3М-х-L-х)

Артикул соединительной пластины (САР)

САР - 3 М - - L -


Сторона
L-Левая
R-Правая

Размер

3 (22-25)
4 (26-28)
5 (29-31)



Разделительный носок
12", 14", 18"
(ACC-00-101xx)

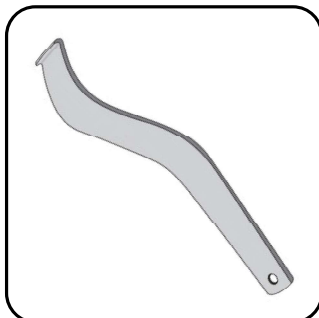

Рожок для снятия оболочки
(ACC-00-103)